

输液提示器/充电板


—— 安装调试使用说明 ——



LonBon 来邦


一、安装调试

1、输液提示器安装图

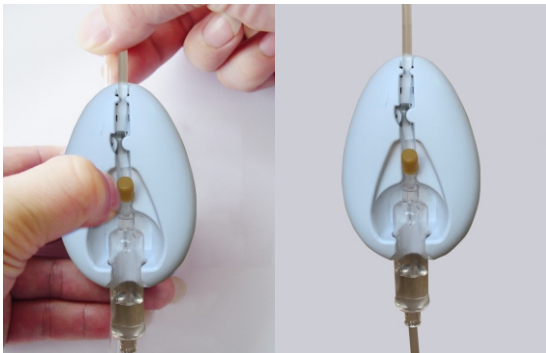

- (1) 输液管应整齐完全的放入检测槽内。
- (2) 输液时不要大幅度拉动或晃动提示器。
- (3) 不要在光线变化较大的环境中使用。

2、充电板安装图

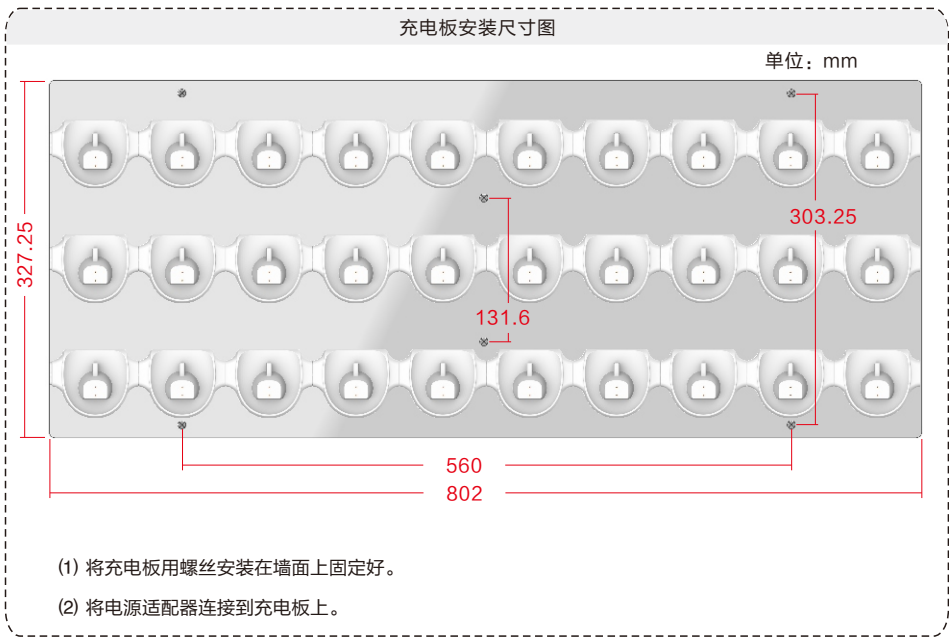

二、设置调试

- 1、**安装准备**：在安卓手机上安装“医院设置工具”App。
- 2、**开机**：长按“确定”按键2秒，输液提示器开机。
- 3、**设备对码**：第一次使用时，开机后屏幕显示“长按2秒确定进入对码”，长按2秒确定后会进入“请在APP上输入床位号按搜索”。打开医院设置工具APP，先在“设备运维-系统设置”界面中设置好信息交互服务器和物联网服务器的IP和端口；进入“设备设置-蓝牙类设备-输液提示器-添加”界面，选择所属病区并输入床号，点击“去绑定”进入绑定界面，将手机靠近输液提示器，点击“绑定”按钮开始搜索，选择信号最强的输液提示器，再点击“保存”，输液提示器提示“对码成功”同时屏幕上方显示床号，则表示输液提示器绑定完成。

三、使用说明

- 1、**安装**：先通过输液管阀门调整好液体的滴速，再将输液管的滴壶卡进输液提示器背部凹槽内。
 - 2、**开始输液**：待机状态下屏幕显示“XX床，按确定开始”，按一下确定键后则进入输液状态，此时屏幕显示“长按确定退出，输液中...”，检测出滴速后会自动跳转到“XX滴/分钟，输液中...”，输液状态下长按确定键可退出到待机状态。
 - 3、**输液完毕**：检测到输液管内无液体时，输液提示器发出“di-di-di...”蜂鸣声并夹紧输液管，同时屏幕显示“输液完毕，请按确定解除”并将报警信息发送至护士站一览表，此时按“确定”键即可解除报警，同时压轮复位松开输液管。
 - 4、**充电**：将输液提示器磁吸在充电板上即可充电。
 - 5、**升级**：输液提示器放在充电板上进入充电状态，打开医院设置工具APP，进入“设备运维-设备升级-输液提示器升级”界面，选择升级文件后点击定制版本升级，升级过程中输液提示器会进入黑屏状态，升级中禁止拿离充电板，升级完成后输液提示器将自动开机。
 - 6、**关机**：在6秒内，连续按下“确定”键15次，输液提示器关机。
- 注：当滴壶内液面超过输液提示器底部时，可能无法测出滴速，但不影响输液完毕的判断。